

GREEN MASTER

5

представя

Wrinkle Eraser pen
VB collagena clinic & Aloe professional



Стъпки за красива кожа

cosmetics



Съдържание на презентацията



Wrinkle Eraser pen

описание, действие и употреба.

Често задавани въпроси.

Съвети за постигане на по-добри резултати.

cosmetics





Wrinkle Eraser pen

Магическа писалка “Гума за бръчки”



“Гумата за бръчки” е високотехнологична система, която използва най-съвременни технологии - интелигентната IC CMOS Silicon Valley Chip technology и биомиметична технология (от bios – живот, и mimesis – имитирам).

За редуциране на бръчките се използва специален електрод, който осъществява микро въздействие през повърхността на бръчката в основния дермален слой. Той изпраща безвредна, безболезнена bionic вълна, която “имитира” фотонна енергийна вълна за активиране процеса на отделяне на коензим.





Wrinkle Eraser pen

Магическа писалка “Гума за бръчки”



В резултат на тези процеси плавно и постепенно се “изтриват като с гума” фините линии, дълбоките бръчки и се предотвратява появата на нови, както хирургически операции, интервенции с лазер, инжекции и др.

Какво се постига с използването на уреда?

- Стимулиране на естествената активност и обновителните процеси в кожата;
- Активиране на производството на колаген и h-EGF (човешки епидермален растежен фактор);
 - Репариране на еластичните влакна.





Wrinkle Eraser pen

Магическа писалка “Гума за бръчки”



Ефекти от Магическата писалка:

- Видимо намалява и премахва мимическите бръчки и бръчките около очите “пачи крак”;
- Ефективно премахва торбичките под очите и подпухналостта;
- Изсветлява тъмните кръгове около очите;
- Изтрива като гума бръчките, фините линии и оформя очите;
- Забавя образуването на бръчки и процеса на стареене.





cosmetics

Wrinkle Eraser pen Магическа писалка “Гума за бръчки”



За всеки закупен уред получавате специален продукт
от професионална висша козметика
VB collagena clinic & Aloe professional:


VB серум
за околоочния контур





Wrinkle Eraser pen

Магическа писалка “Гума за бръчки”

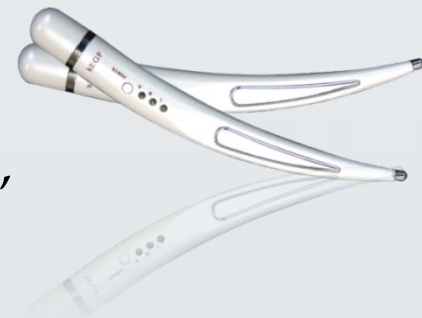


Как се използва уреда?

1. След употреба на **SKY FACE GALVANIC SPA+** или върху почистена кожа нанесете обилно серума в зоната около очите.
2. Включете уреда и изберете степен на интензивност (L- ниска – до 30 год., M – средна – 30-45 год., H – висока – над 45 год.).
3. Хванете за страничните сензори, сложете електрода на дадена бръчка и движете леко, като спирате за 15-20 сек. върху една точка. Ще чувате звуков сигнал.
4. За постигане на по-добри резултати, желателно е да минете по 4 пъти през всяка бръчка, като разстоянието между точките е около 0,5 - 1 см.
5. Не забравяйте да третирате бръчките симетрично на лицето.





Колко често се използва
Wrinkle Eraser pen
Магическа писалка “Гума за бръчки”

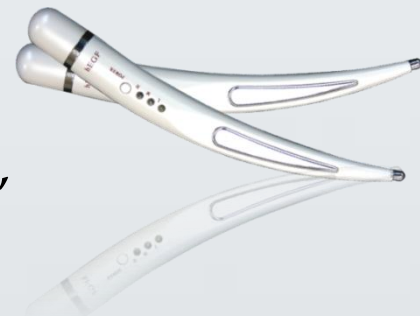

Първи 2-3 седмици:

На всеки два или три дена.
Може и 2 пъти на ден, но с минимум 6 часа между сеансите.

След 3-та седмица:

Използвайте 1-2 пъти седмично за поддържане на
резултатите.

Предлагаме Ви в началото да направите снимка в близък
план на очите и лицето си без грим и всяка следваща
седмица да се снимате отново, за да отчетете разликата.

Професионалната козметика
VB collagena clinic & Aloe professional
се използва всеки ден сутрин и вечер по време на
използването на уреда, а и след това.





Често задавани въпроси:



1. След колко време се получават видими резултати?

Още след първите няколко сеанса се усещат резултатите, а най-видимо е след месец, месец и половина употреба.

2. Гелът много бързо попива?

При първите сеанси е нормално, тъй като кожата обикновено е дехидратирана. Нанасяйте гел върху всеки участък непосредствено преди третирането му с уреда. Може да се добавя гел и по време на самата процедура – не трябва кожата да е суха, за да не се разтегля се при натиск.



3. Може ли двата уреда да се използват непосредствено един след друг?

Да, даже ефектът е по-добър.





cosmetics

Често задавани въпроси:



4. Трябва ли да се нанася крем след процедурите с някой от уредите?

Препоръчително е - това е финалната фаза за по-добър ефект и по-добро подхранване на кожата.

5. Преди гримиране може ли да се използва?

Да, козметиката може да се използва като основа за грим, а уредите е препоръчително да се използват след сваляне на грима, но при необходимост може и преди.



Съвети за постигане на още по-добри резултати:



1. Пийте **достатъчно вода** всеки ден – по 30 мл на килограм телесно тегло.
2. Винаги нанасяйте козметиката върху **добре почистена кожа** и с чисти ръце.
3. Изполвайте **качествена декоративна козметика** и я сменяйте на всеки 6 месеца.
4. **Не смесвайте козметични продукти** от различни производители върху една и съща кожа през един и същ период.
5. **След употреба почиствайте добре уреда** (най-добре с леко навлажнена кърпа от микрофибър – за премахване на евентуални бактерии; особено ако повече хора ползват един и същ уред).
6. Препоръчваме Ви да комбинирате козметичните процедури с прием на **биологично активни добавки**, които подпомагат кожата за образуването на колаген и подобряват еластичността ѝ.

cosmetics



GREEN X MASTER

5

представя

Wrinkle Eraser pen
VB collagena clinic & Aloe professional



Стъпки за красива кожа

cosmetics

